

Тест-система InTray COLOREX Screen

Для быстрой изоляции и дифференциации возбудителей мастита, раневых и урогенитальных инфекций. Посев проб мочи и молока производится напрямую микробиологической петлёй или тампоном.

БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Питательный хромогенный агар COLOREX™ Screen используется для изоляции различных микроорганизмов. Выросшие на агаре колонии отличаются по цвету и морфологии, что позволяет дифференцировать патогены всего за 24 часа, не обладая специальными знаниями.

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА

Благодаря инновационному составу агара обеспечивается рост различных цветных колоний в процессе одной инкубации. Быстрая и простая предварительная идентификация микроорганизмов.

**Открой
НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ!**



Удобство

- Готовая к использованию тест-система. Варить питательную среду, стерилизовать и разливать её по чашкам Петри больше не требуется
- Изучайте морфологию выросших цветных колоний непосредственно через покровную плёнку тест-системы
- Можно использовать непосредственно в животноводческом хозяйстве, на месте возникновения проблем или в ветеринарной клинике
- Легкое выявление и идентификация возбудителей мастита, раневых и урогенитальных патогенов – хромогенная дифференциация различных микроорганизмов




Внешний вид ЦВЕТНЫХ КОЛОНИЙ

Escherichia coli

От темно-розовых до красноватых


ATCC 25922

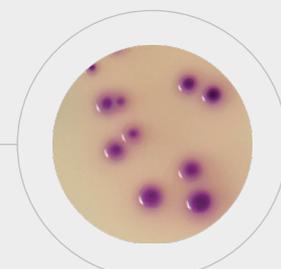

Enterococcus faecium

Бирюзово-синие


ATCC 6569

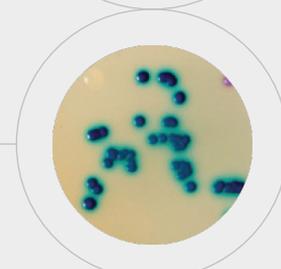

Proteus mirabilis

Коричневое гало

ATCC 43071

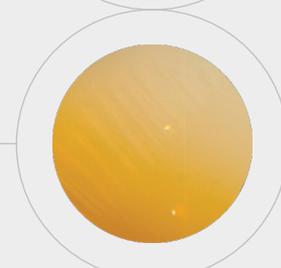

Klebsiella pneumoniae

Синие с металлическим оттенком


ATCC 13883



Staphylococcus aureus

Небольшие молочно-золотистые

ATCC 25923

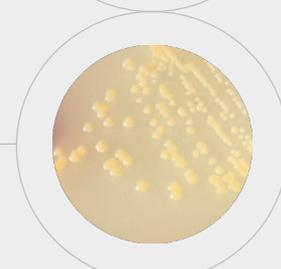

Staphylococcus saprophyticus

Небольшие молочно-розовые

ATCC 15305



Информация для заказа в интернет-магазине Стайлаб **stylab-shop.com**



**Тест-система InTray COLOREX Screen
для изоляции и дифференциации
возбудителей различных инфекций, 1 шт.**

артикул 421352996

В корзину

Подробнее на сайте stylab-shop.com в разделе
«Тест-системы» / «Скрининг»

Стайлаб

Дистрибьютор в России и других странах ЕАЭС

Москва, Звенигородское шоссе, д. 5, стр. 1

+7 495 662-64-15, +7 495 707-28-68 (телефон/WhatsApp)

order@stylab.ru (отдел продаж Стайлаб)

support@stylab.ru (служба поддержки Стайлаб)

stylab-shop.com

stylab[®]

